

QuickBlock™免疫染色封闭液

产品编号	产品名称	包装
P0260	QuickBlock™免疫染色封闭液	100ml

产品简介:

- 碧云天生产的QuickBlock™免疫染色封闭液(QuickBlock™ Blocking Buffer for Immunol Staining)是最新一代的快速高效免疫染色封闭液, 总体效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、血清等的封闭液及国外同类产品, 主要用于免疫荧光(Immunofluorescence, IF)、免疫组化(Immunohistochemistry, IHC)和免疫细胞化学(Immunocytochemistry, IC)等免疫染色时细胞或组织样品的封闭, 也可以用于免疫染色实验中一抗或二抗的稀释。
- QuickBlock™免疫染色封闭液**快速高效**。封闭时间通常仅需5-15分钟, 封闭效果与传统的免疫染色封闭液BSA相比效果一致甚至更优(参考图1和图2), 更优时通常表现为更强的染色效果。
- QuickBlock™免疫染色封闭液封闭后**背景极低**。本封闭液不含血清和白蛋白, 确保极高的信噪比。
- QuickBlock™免疫染色封闭液**兼容性好**, 兼容辣根过氧化物酶(Horseradish peroxidase, HRP)、碱性磷酸酶(Alkaline phosphatase, AP)和生物素标记的二抗。本产品中添加了不影响HRP和AP活性的防腐剂, 不会干扰HRP或AP标记二抗的检测。同时本产品不含生物素, 不会干扰基于生物素的检测。
- QuickBlock™免疫染色封闭液**使用便捷**。本产品无需添加任何额外的试剂, 可以直接用于免疫染色实验中样品的封闭。
- 本免疫染色封闭液中含有适量Triton X-100, 可以通透细胞膜。经本免疫染色封闭液处理的细胞或组织可以检测细胞内的目的蛋白, 包括细胞浆内、细胞核内和各种细胞器内的目的蛋白。
- 免疫染色实验中使用荧光检测时, 本产品与BSA的封闭效果对比参见图1。在相同样品和实验条件下, 仅封闭液及封闭时间存在如下图所示的差异时, 碧云天的QuickBlock™免疫染色封闭液封闭10分钟的整体效果略优于BSA封闭1小时的效果。

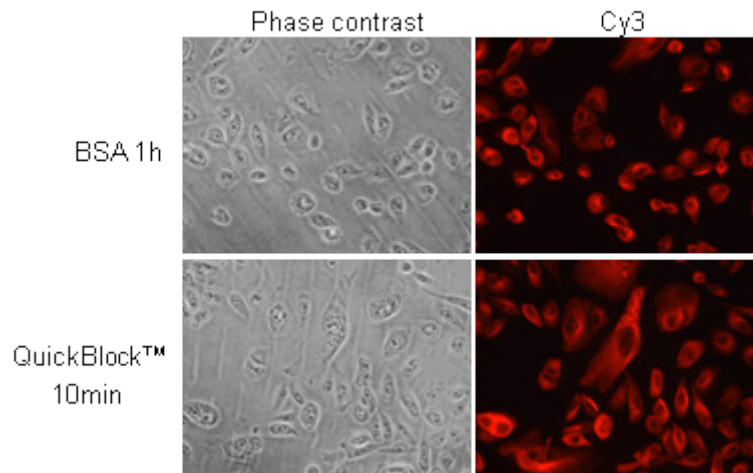


图1. 荧光检测时, QuickBlock™免疫染色封闭液与BSA的封闭效果比较。上图为HeLa细胞用一抗 α -Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody (AF0001)和二抗Cy3标记的山羊抗兔IgG(H+L) (A0516)的检测效果图。图中可见清晰的红色荧光的微管形态, 两种封闭液封闭后的荧光背景都很低, 但曝光时间相同时QuickBlock™免疫染色封闭液封闭后的荧光亮度略强于BSA封闭后的荧光亮度, 且封闭时间仅需10分钟。实际实验结果会因样品、抗体、实验条件等的不同而存在差异, 图中数据仅供参考。

- 免疫染色实验中使用DAB显色时, 本产品与BSA的封闭效果对比参见图2。在相同样品和实验条件下, 仅封闭液及封闭时间存在如下图所示的差异时, 碧云天的QuickBlock™免疫染色封闭液封闭10分钟与BSA封闭1小时的效果一致。

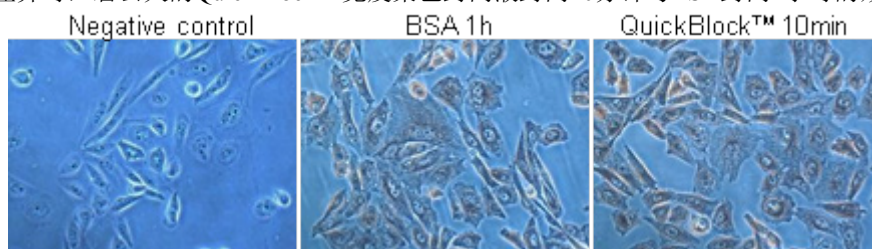


图2. 免疫染色实验中使用DAB显色时, QuickBlock™免疫染色封闭液与BSA的封闭效果比较。上图为HeLa细胞用一抗 α -Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody (AF0001)和二抗辣根过氧化物酶标记山羊抗兔IgG(H+L) (A0208), 并使用DAB辣根过氧

化物酶显色试剂盒(P0203)进行显色的检测效果图。图中可见清晰的棕色微管形态，两种封闭液封闭后的背景都很低，且在曝光时间相同时两种封闭液的信号强度一致，但QuickBlock™免疫染色封闭液仅需封闭10分钟。无一抗的BSA封闭为Negative control。实际实验结果会因样品、抗体、实验条件等的不同而存在差异，图中数据仅供参考。

- 关于不同封闭液的选择，请参考碧云天的相关网页：<http://www.beyotime.com/support/blocking-buffer.htm>。
- 按照每个样品封闭需要0.1-1ml QuickBlock™免疫染色封闭液计算，一个包装的本产品可以封闭100-1000个样品。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
P0260	QuickBlock™免疫染色封闭液	100ml
—	说明书	1份

保存条件：

4°C保存，一年有效。长期不使用可以-20°C保存。

注意事项：

- 本产品建议仅使用一次，重复使用可能会导致封闭效果下降。但对于使用较大体积的封闭液进行封闭或者使用一些信噪比很高的一抗，例如一些内参抗体，本封闭液可以重复使用2-3次。回收的封闭液请勿与未使用过的封闭液混合。
- 由于没有任何一种封闭液是适用于所有实验体系的，因此对于一些特殊的实验，可能需要根据具体情况考虑使用其它更合适的封闭液。
- 为进一步提高信噪比，推荐同时使用QuickBlock™免疫染色一抗稀释液(P0262)、QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液(P0265)和QuickBlock™免疫组化染色二抗稀释液(P0267)用于一抗及二抗的稀释。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

对于细胞或组织样品，在固定后用免疫染色洗涤液洗涤一次(注：石蜡切片需先脱蜡等)，然后就可以用QuickBlock™免疫染色封闭液进行封闭，通常建议封闭10分钟。如有时间安排等方面的需要，也完全可以室温封闭10-180分钟甚至4°C封闭过夜。封闭时可以在摇床上缓慢摇动。如果样品在摇动时容易脱落，也可以直接放置在桌面上不进行任何摇动，效果会略差一些，但也可以满足常规的要求。完成封闭后就可以进行一抗孵育等后续操作。

详细的免疫染色操作可以参考碧云天相关网页：<http://www.beyotime.com/support/immunol-staining.htm>。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
P0220	QuickBlock™封闭液(PBS)	100ml
P0222	QuickBlock™封闭液(PBSTw)	100ml
P0226	QuickBlock™封闭液(PBSTx)	100ml
P0228	QuickBlock™封闭液(TBS)	100ml
P0231	QuickBlock™封闭液(TBSTw)	100ml
P0233	QuickBlock™封闭液(TBSTx)	100ml
P0235	QuickBlock™封闭液(10X)	100ml
P0252	QuickBlock™ Western封闭液	100ml
P0256	QuickBlock™ Western一抗稀释液	100ml
P0258	QuickBlock™ Western二抗稀释液	100ml
P0260	QuickBlock™免疫染色封闭液	100ml
P0262	QuickBlock™免疫染色一抗稀释液	100ml
P0265	QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液	100ml
P0267	QuickBlock™免疫组化染色二抗稀释液	100ml

使用本产品的文献：

1. Cheng L, Zhang D, Chen B. Tumor necrosis factor α -induced protein-3 protects zinc transporter 8 against proinflammatory cytokine-induced downregulation. *Exp Ther Med.* 2016 Sep;12(3):1509-1514.
2. Long J, Xiao Y, Liu L, Cao Y. The adverse vascular effects of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) to human vein endothelial cells (HUVECs) in vitro: role of length of MWCNTs. *J Nanobiotechnology.* 2017 Nov 10;15(1):80.
3. Chen J, Mao S, Li H, Zheng M, Yi L, Lin JM, Lin ZX. The pathological structure of the perivascular niche in different microvascular patterns of glioblastoma. *PLoS One.* 2017 Aug 3;12(8):e0182183.
4. Ding Y, Zheng Y, Liu T, Chen T, Wang C, Sun Q, Hua M, Hua T. Changes in GABAergic markers accompany degradation of neuronal function in the primary visual cortex of senescent rats. *Sci Rep.* 2017 Nov 2;7(1):14897.
5. Chen GL, Ye T, Chen HL, Zhao ZY, Tang WQ, Wang LS, Xia JL. Xanthine dehydrogenase downregulation promotes TGF β signaling and cancer stem cell-related gene expression in hepatocellular carcinoma. *Oncogenesis.* 2017 Sep 25;6(9):e382.

6. Zhao Z, Zhao Y, Zhuang XY, Lo WC, Baker MAB, Lo CJ, Bai F. Frequent pauses in Escherichia coli flagella elongation revealed by single cell real-time fluorescence imaging. *Nature Communications*. 2018 May 14;9(1):1885.
7. Ding M, Ning J, Feng N, Li Z, Liu Z, Wang Y, Wang Y, Li X, Huo C, Jia X, Xu R, Fu F, Wang X, Pei J. Dynamin-related protein 1-mediated mitochondrial fission contributes to post-traumatic cardiac dysfunction in rats and the protective effect of melatonin. *J Pineal Res*. 2018 Jan;64(1). doi: 10.1111/jpi.12447.
8. Yang D, Sun C, Zhang J, Lin S, Zhao L, Wang L, Lin R, Lv J, Xin S. Proliferation of vascular smooth muscle cells under inflammation is regulated by NF- κ B p65/microRNA-17/RB pathway activation. *Int J Mol Med*. 2018 Jan;41(1):43-50.
9. Hu H, Zhao P, Liu J, Ke Q, Zhang C, Guo Y, Ding H. Lanthanum phosphate/chitosan scaffolds enhance cytocompatibility and osteogenic efficiency via the Wnt/ β -catenin pathway. *J Nanobiotechnology*. 2018 Nov 29;16(1):98.
10. Ding Y, Chen T, Wang Q, Yuan Y, Hua T. Axon initial segment plasticity accompanies enhanced excitation of visual cortical neurons in aged rats. *Neuroreport*. 2018 Dec 12;29(18):1537-1543.
11. Liu L, Zhang Y, Chang X, Li R, Wu C, Tang L, Zhou Z. Fluorochloridone perturbs blood-testis barrier/Sertoli cell barrier function through Arp3-mediated F-actin disruption. *Toxicol Lett*. 2018 Oct 1;295:277-287.
12. Yang HW, Liu XY, Shen ZF, Yao W, Gong XB, Huang HX, Ding GH. An investigation of the distribution and location of mast cells affected by the stiffness of substrates as a mechanical niche. *Int J Biol Sci*. 2018 Jun 22;14(9):1142-1152.
13. Wang X, Zou P, He Y, Meng K, Quan F, Zhang Y. Effect of luteinizing hormone on goat theca cell apoptosis and steroidogenesis through activation of the PI3K/AKT pathway. *Anim Reprod Sci*. 2018 Mar;190:108-118.
14. Fu C, Yin D, Nie H, Sun D. Notoginsenoside R1 Protects HUVEC Against Oxidized Low Density Lipoprotein (Ox-LDL)-Induced Atherogenic Response via Down-Regulating miR-132. *Cell Physiol Biochem*. 2018;51(4):1739-1750.
15. Liu X, Wang Z, Zhang G, Zhu Q, Zeng H, Wang T, Gao F, Qi Z, Zhang J, Wang R. Overexpression of asparaginyl endopeptidase is significant for esophageal carcinoma metastasis and predicts poor patient prognosis. *Oncol Lett*. 2018 Jan;15(1):1229-1235.
16. Jin X, Yu Y, Zou Q, Wang M, Cui Y, Xie J, Wang Z. MicroRNA-105 promotes epithelial-mesenchymal transition of nonsmall lung cancer cells through upregulating Mcl-1. *J Cell Biochem*. 2018 Oct 14. doi: 10.1002/jcb.27873.
17. Lin L, Wang L, Liu Y, Xu C, Tu Y, Zhou J. Non-thermal plasma inhibits tumor growth and proliferation and enhances the sensitivity to radiation in vitro and in vivo. *Oncology Reports*. 2018 Dec;40(6):3405-3415.
18. Sun H, Shao W, Liu H, Jiang Z. Exposure to 2,4-dichlorophenoxyacetic acid induced PPAR β -dependent disruption of glucose metabolism in HepG2 cells. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2018 Jun;25(17):17050-17057.
19. Chen G, Li Q, Luo Y, Liu T, Zhou S, Pan E, Peng L. Effect of Notoginsenoside R1 on autologous adipose graft in rats. *Mol Med Rep*. 2018 Apr;17(4):5928-5933.
20. Guo D, Hu X, Zhang H, Lu C, Cui G, Luo X. Orientin and neuropathic pain in rats with spinal nerve ligation. *Int Immunopharmacol*. 2018 May;58:72-79.
21. Shi GH, Zhou L. Emodin suppresses angiogenesis and metastasis in anaplastic thyroid cancer by affecting TRAF6-mediated pathways in vivo and in vitro. *Mol Med Rep*. 2018 Dec;18(6):5191-5197.
22. Tengfei Liu, Xiaoyan Liu, Hui Xiong, Cheng Xu, Jianxu Yao, Xiumei Zhu, Jianping Zhou and Jing Yao. Mechanisms of TPGS and its derivatives inhibiting P-glycoprotein efflux pump and application for reversing multidrug resistance in hepatocellular carcinoma. *Polym. Chem.*, 2018, 9, 1827-1839
23. Liang X, Li B, Huang Q, Liu D, Ma H. Klotho prevents DEX-induced apoptosis in MC3T3-E1 osteoblasts through the NF- κ B signaling pathway. *Biochem Biophys Res Commun*. 2018 Dec 9;507(1-4):355-361.
24. Zhang W, Chen W, Li Z, Ma L, Yu J, Wang H, Liu Z, Xu B. Identification and Characterization of Three New Cytochrome P450 Genes and the Use of RNA Interference to Evaluate Their Roles in Antioxidant Defense in *Apis cerana cerana Fabricius*. *Front Physiol*. 2018 Nov 15;9:1608.
25. Zhang L, Liu J, Zhou F, Wang W, Chen N. PGC-1 α ameliorates kidney fibrosis in mice with diabetic kidney disease through an antioxidative mechanism. *Mol Med Rep*. 2018 Mar;17(3):4490-4498.
26. Liu L, Chang X, Zhang Y, Wu C, Li R, Tang L, Zhou Z. Fluorochloridone induces primary cultured Sertoli cells apoptosis: Involvement of ROS and intracellular calcium ions-mediated ERK1/2 activation. *Toxicol In Vitro*. 2018 Mar;47:228-237.
27. Wu JX, Tong L, Hu L, Xia CM, Li M, Chen QH, Chen FX, Du DS. Upregulation of Nav1.6 expression in the rostral ventrolateral medulla of stress-induced hypertensive rats. *Hypertens Res*. 2018 Dec;41(12):1013-1022.
28. Xu H, Chen J, Si X, Chen M, Pei F, Qiu C, Wu J, Guan X. PKR inhibition mediates endotoxin tolerance in macrophages through inactivation of PI3K/AKT signaling. *Mol Med Rep*. 2018 Jun;17(6):8548-8556.
29. Wu K, Mu XY, Jiang JT, Tan MY, Wang RJ, Zhou WJ, Wang X, He YY, Li MQ, Liu ZH. miRNA-26a-5p and miR-26b-5p inhibit the proliferation of bladder cancer cells by regulating PDCD10. *Oncol Rep*. 2018 Dec;40(6):3523-3532.
30. Song Z, Yang F, Du H, Li X, Liu J, Dong M, Xu X. Role of artemin in non-small cell lung cancer. *Thorac Cancer*. 2018 May;9(5):555-562.
31. Gao S, Wang Y, Li D, Guo Y, Zhu M, Xu S, Mao J, Fan G. Tanshinone IIA Alleviates Inflammatory Response and Directs Macrophage Polarization in Lipopolysaccharide-Stimulated RAW264.7 Cells. *Inflammation*. 2018 Sep 14. doi: 10.1007/s10753-018-0891-7.
32. Wang Z, Zhou W, Dong H, Ma X, He Z. Dexmedetomidine pretreatment inhibits cerebral ischemia/reperfusion-induced neuroinflammation via activation of AMPK. *Mol Med Rep*. 2018 Oct;18(4):3957-3964.
33. Li XH, Wang HP, Tan J, Wu YD, Yang M, Mao CZ, Gao SF, Li H, Chen H, Cai WB. Loss of pigment epithelium-derived factor leads to ovarian oxidative damage accompanied by diminished ovarian reserve in mice. *Life Sci*. 2019 Jan 1;216:129-139.
34. Pei-PeiZhao, Hao-RanHu, Jia-YuLiu, Qin-FeiKe, Xiao-YuanPeng, HaoDing, Ya-PingGuo. Gadolinium phosphate/chitosan scaffolds promote new bone regeneration via Smad/Runx2 pathway. *Chemical Engineering Journa*. 2019 March 1;359: 1120-1129.

Version 2018.12.21