

pE2F-TA-Luc (报告基因质粒)

产品编号	产品名称	包装
D4054-1 µg	pE2F-TA-Luc (报告基因质粒)	1 µg
D4054-100 µg	pE2F-TA-Luc (报告基因质粒)	100 µg

产品简介:

➤ pE2F-TA-Luc (报告基因质粒)是碧云天自行研发的用于检测E2F转录因子家族的转录活性水平的报告基因质粒。本质粒是以碧云天的pGL6-TA质粒为模板,在其多克隆位点插入了5个E2F结合位点,可以高灵敏度地检测E2F的激活水平。


➤ 本报告基因质粒的基本信息如下:

Name	pE2F-TA-Luc	Backbone	pGL6-TA
<i>cis-element</i>	E2F response element		
Description	pE2F-TA-Luc is designed to measure transcriptional activity of E2F transcription factor family, including E2F1, E2F2, E2F3, E2F4, E2F5. The E2F protein family plays a crucial role in the control of cell cycle and action of tumor suppressor proteins and is also a target of the transforming proteins of small DNA tumor viruses. These proteins bind preferentially to retinoblastoma protein pRB and mediate both cell proliferation and p53-dependent/independent apoptosis.		

➤ pGL6-TA质粒是用于在哺乳动物细胞中进行萤火虫萤光素酶(Firefly luciferase)报告基因检测的新一代质粒。该报告基因质粒比Promega公司的pGL3系列有了全面的改进,一方面对于luciferase的编码进行了改进,确保能更好地在哺乳动物细胞中进行表达,同时对整个质粒中所有的可以被预测出的可能的转录因子结合位点全部进行了适当的突变处理,在保持原有功能不变的情况下,使各种转录因子在质粒上的非特异性结合降到最低。

➤ 萤光素、萤光素酶、萤火虫萤光素酶和海肾萤光素酶也经常被称为荧光素、荧光素酶、萤火虫荧光素酶和海肾荧光素酶。

➤ pE2F-TA-Luc质粒的图谱如下:

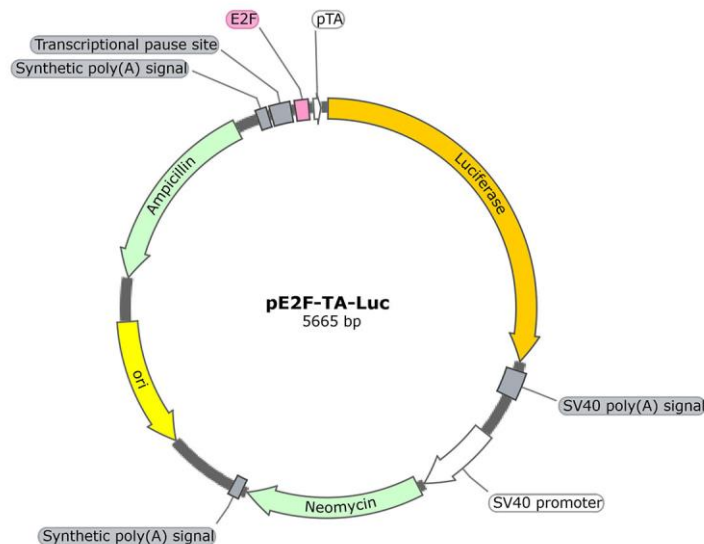

➤ pE2F-TA-Luc质粒的主要信息如下:

Base pairs	5665
E2F response element	5526-5585
Luciferase reporter gene	7-1659
SV40 poly(A) signal	1703-1824
SV40 promoter	2018-2375
Neomycin	2406-3200
Synthetic poly(A) signal	3225-3273

origin of replication (ori)	3600-4188
Ampicillin resistance gene	4388-5248
Synthetic poly(A) signal	5353-5401
Transcriptional pause site	5415-5506
Minimal TA promoter (pTA)	5608-5639

➤ pE2F-TA-Luc中没有的酶切位点包括:

AatII	AbsI	AccIII	AccB7I	AclI	AcvI	AflII
AjiI	AjuI	AloI	Aor13HI	AscI	AseI	AsiSI
AspI	Asp700I	AsuNHI	BarI	BbrPI	BfrI	BmgBI
BmtI	BsaI	BsaAI	BsaXI	BseAI	BsePI	BsiWI
Bso31I	Bsp13I	Bsp68I	BspEI	BspOI	BspTI	BspTNI
BssHII	Bst98I	BstAFI	BstBAI	BstSNI	BtrI	BtuMI
CpoI	CspI	CspCI	Ecl136II	Eco31I	Eco32I	Eco53kI
Eco72I	Eco105I	EcoICRI	EcoRI	EcoRV	FauNDI	FspAI
I-CeuI	I-PpoI	I-SceI	KflI	Kpn2I	MauBI	MroI
MroXI	MspCI	MssI	NdeI	NheI	NruI	PacI
Paer7I	PalAI	PasI	PauI	PdmI	Pfl23II	PflFI
PflMI	PfoI	PI-PspI	PI-SceI	PmaCI	PmeI	PmlI
Ppu21I	PshBI	Psp124BI	Psp1406I	PspCI	PspLI	PspXI
PsrI	PsyI	PteI	RgaI	RruI	RsrII	Rsr2I
SacI	SanDI	SbfI	SdaI	SfaAI	Sfr274I	SgfI
SgrDI	SgsI	SlaI	SmiI	SnaBI	SrfI	Sse8387I
SstI	SwaI	Tth111I	Van91I	Vha464I	VspI	XcmI
XhoI	XmnI	ZraI				

➤ pE2F-TA-Luc中的单酶切位点包括:

AarI	AhdI	ApaLI	ApoI	BamHI	BciVI	BcoDI
BglI	BpmI	BsmAI	BsmBI	BsrGI	BstBI	BstEII
BstXI	BstZ17I	Bsu36I	DraIII	EcoNI	Esp3I	MfeI
MluI	MreI	NotI	PciI	PsiI	PvuI	SacII
SalI	SfiI	SmaI	SpeI	StuI	TspMI	XmaI

➤ pE2F-TA-Luc质粒中推荐使用的测序引物序列如下:

2105-F (5290-5312): 5'-ACTAGTACGTCTCTCAAGGATAA-3'

➤ pE2F-TA-Luc的全序列信息请参考碧云天的网站上该质粒的信息。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
D4054-1 µg	pE2F-TA-Luc (报告基因质粒)	1 µg
D4054-100 µg	pE2F-TA-Luc (报告基因质粒)	100 µg
—	说明书	1份

保存条件:

-20℃保存。

注意事项:

- 本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途，也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 首次使用1 µg包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。
2. 100 µg包装的本产品质粒浓度为0.25 µg/µl，共400 µl。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. 本报告基因质粒可用常规的细胞转染方法转染细胞。检测时可采用碧云天的萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒(RG005/RG006)或双萤光素酶报告基因检测试剂盒(RG027/RG028)等报告基因检测试剂盒进行检测，详见相关产品。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
D2105-1 µg	pGL6-TA (报告基因质粒)	1 µg
D2105-100 µg	pGL6-TA (报告基因质粒)	100 µg
RG005/RG006	萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次

RG007S/M	萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒II	100/1000次
RG009S/M	萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒(增强型)	100/1000次
RG010S/M	萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒II (增强型)	100/1000次
RG016/RG017	海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG027/RG028	双萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG029S/RG029M	双萤光素酶报告基因检测试剂盒II	100/1000次
RG051S/M	Bright-Lumi™萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG052S/M	Bright-Lumi™ II萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG055S/M	One-Lumi™萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG056S/M	One-Lumi™ II萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG058S/M	Steady-Lumi™萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG059S/M	Steady-Lumi™ II萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG062S/M	Renilla-Lumi™海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG066S/M	Renilla-Lumi™ Plus海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG088S/M	Dual-Lumi™双萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG089S/M	Dual-Lumi™ II双萤光素酶报告基因检测试剂盒	100/1000次
RG126S/M	萤火虫萤光素酶报告基因细胞裂解液	10/100ml
RG127S/M	萤火虫萤光素酶报告基因细胞裂解液(增强型)	10/100ml
RG129S/M	海肾萤光素酶报告基因细胞裂解液	10/100ml
RG0036	β-半乳糖苷酶报告基因检测试剂盒	200次

Version 2022.05.06