

Liquid Blocker Super PAP Pen (免疫组化笔)



产品简介

碧云天 Liquid Blocker Super PAP Pen (免疫组化笔) 主要用于在免疫组化或免疫荧光等染色实验过程中，对组织周围画圈，形成包围组织样本的热稳定疏水隔离区，使抗体、探针等试剂只限于划定的疏水区内而不流失，从而有效减少各种试剂的使用量，并改善染色和孵育效果。

产品特点

- **笔液均衡，干燥速度快** 笔液输出均衡，画出的疏水圈 3-5 秒瞬间干燥成膜，气味温和不刺鼻，且略带黄色，方便观察或加入抗体等溶液；
- **节约试剂，提高实验效率** 可在保证实验效果的前提下有效减少各种试剂的使用量，并避免干片、脱片等问题，方便染色操作，加快操作速度；
- **应用范围广** 可用于石蜡切片、冰冻切片、培养细胞等在载玻片、盖玻片、多孔板或细胞培养皿等适当实验器材上进行各种染色和反应。还可广泛用于在玻片上进行的原位杂交、TUNEL 法等细胞凋亡检测、HE 染色、结晶紫染色等各种水性溶液的染色和反应；
- **耐受常见去垢剂** 干燥后的笔迹可以耐受溶液中含有常规浓度的 Triton X-100、Tween-20、NP-40 等常见去垢剂；
- **提升孵育效果** 热稳定疏水区可保持溶液积聚在画定的相应区域内，使样品表面可以覆盖更高的液面增加孵育效果，同时可避免不同试剂间的相互污染，使多个样品或多种抗体、探针能在同一玻片或培养皿中进行染色和比较。
- 使用弹簧笔尖，可以有效避免或极大减缓笔液的挥发；
- 本产品画出的疏水圈可被二甲苯或无水乙醇等类似的有机溶剂去除。

产品效果

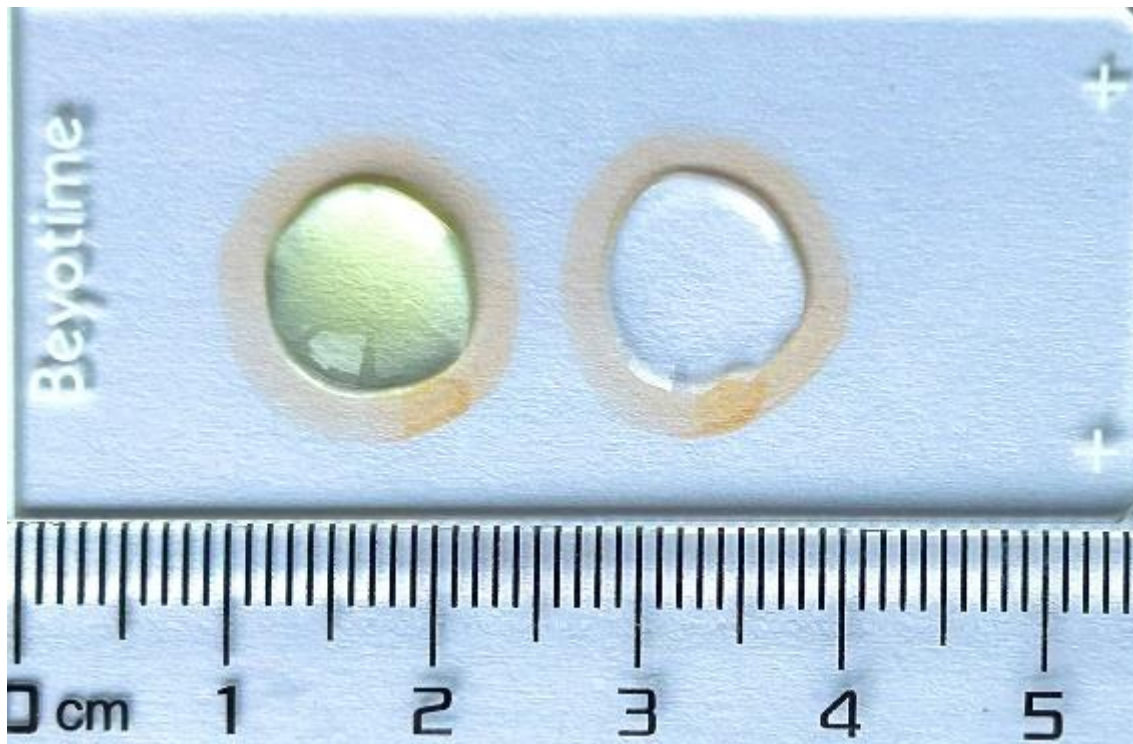


图1. 碧云天 Liquid Blocker Super PAP Pen (免疫组化笔)的使用效果图。左圈内为带有颜色的液体,右圈内为无色液体,疏水圈的宽度约2-3mm,实际结果会因实验条件等的不同而存在差异,图中效果仅供参考。

产品信息

产品编号	产品名称	产品包装
P0139	Liquid Blocker Super PAP Pen (免疫组化笔)	1支

订货服务方式

E-mail: order@beyotime.com

QQ : 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: www.beyotime.com

上海碧云天生物技术股份有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: www.beyotime.com

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: info@beyotime.com



碧云天网站



微信公众号